

Caresite®

Conector universal fără ac,
cu valvă de silicon și dislocare pozitivă

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Date de performanță ale dispozitivelor Caresite¹

- Dislocare fluid: 0,03 ml (pozitiv)
- Durabilitate (număr de accesări testate): 1000

Doar pentru valva Caresite:

- Debit: 208 ml/min
- Rezistență la presiune: până la 400 psi la 15 ml/sec
- Volum de umplere: 0,22 ml
- Volum reținut: 0,20 ml

Caracteristici tehnice

- Sistem închis^{2,3,4,5}
- Sistem fără ac^{6,7}
- Sept divizat activat Luer
- Nu sunt fabricate cu Latex sau DEHP¹
- Compatibil cu sângele / lipidele^{8,9,10}
- Compatibil cu Luer-Lock / Luer-Slip¹




**CLOSED
SYSTEM**



Ajută la reducerea contaminării microbiene și chimice^{2,3,4,11}

- Ventilul care poate fi curățat formează un sistem închis, fiind proiectat pentru a preveni pătrunderea microbilor și scurgerea contaminanților^{2,3}
- Suprafețe netede concepute pentru curățare ușoară^{3,11}
- Ușor de inspectat și de spălat⁹
- Ventilul auto-etanșant ajută la prevenirea scurgerilor și expunerii la medicamente⁴

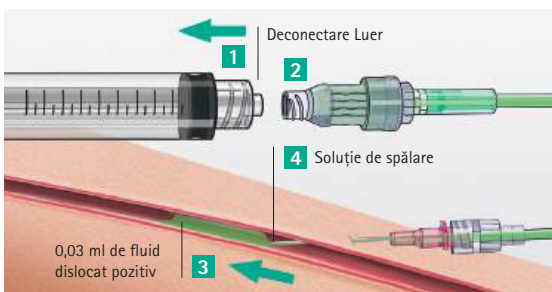

Proiectat pentru a reduce riscul de ocluzie a cateterului^{1,12,13,14,15}

Dislocare pozitivă (designul valvei):

1. Deconectare Luer
2. Valva se închide automat
3. 0,03 ml de fluid dislocat pozitiv
4. Soluție de spălare în interiorul vârfului cateterului



Ușurință în utilizare

- Rezistent la presiune ridicată, potrivit pentru utilizarea cu injectomat/pompe, ceea ce oferă mai multă flexibilitate¹
- Design ergonomic care oferă un acces facil printr-o prindere bună și o conexiune ușoară¹
- Compatibil cu lipidele și cu alcoolul atunci când este utilizat conform IFU^{1,8,9,10}

Portofoliul Caresite® disponibil în România

Caresite®	Denumire articol	Lungime tub	Volum de umplere	Rezistența la presiune	Diametrul interior ø	Unitate de vânzare (buc/cutie)	Cod articol
	Caresite® Valva Straight		0.22	28 bar / 400 psi	-	100	415122-01
	Caresite® cu tub prelungitor de calibru mic (1,3 mm)	20	0.5	21 bar / 300 psi	1.3	100	470100-01
	Caresite® cu tub prelungitor standard	15	0.9	2 bar / 29 psi	2.8	100	470108-01
	Caresite® cu tub prelungitor în Y - calibru mic (1,3 mm)	18	0.9	2 bar / 29 psi	1.3	50	470106-01
	Caresite® cu tub prelungitor triplu - calibru mic	20	1.3	2 bar / 29 psi	1.3	50	470160

Dispozitive medicale asociate utilizării Caresite®



Introcan Safety®
Cateter intravenos periferic cu sistem de protecție integrat împotriva înțepăturilor accidentale, care se activează automat după retragerea acului. Este echipat cu un sept de blocare a refluxului cu acces multiplu, care previne expunerea la sânge și reduce riscul de contaminare, asigurând manipulări sigure și eficiente în practica clinică zilnică.



Softa® Cloth CHX 2%
Șervețel saturat cu o soluție de 70% alcool izopropilic și 2% clorhexidină, gata de utilizare și împachetat individual. Destinat curățării și dezinfectării zonei de acces vascular, de exemplu în cazul valvelor de acces fără ac, cu suprafață plană și dezinfectabilă (inclusiv lumeni și porturi de acces).



SwabCap®
Capac dezinfectant pentru valve de acces fără ac, care acționează și ca barieră fizică împotriva contaminării prin atingere sau aeropurtată între două utilizări ale liniei intravenoase. Dezinfectează valva în 30 de secunde de la aplicare și menține suprafața acesteia dezinfectată până la 7 zile, dacă nu este îndepărtat.



Omniflush® cu SwabCap®
Seringă preumplută pentru spălarea liniei intravenoase, care integrează un SwabCap® – un capac pentru valvele de acces de tip Luer, impregnat cu alcool izopropilic 70% ca agent dezinfectant. Omniflush® cu SwabCap® oferă cadrelor medicale avantajul de a avea SwabCap® disponibil imediat, direct integrat în seringă de spălare cu ser fiziologic.

1. Engineering data on file
2. Test report - Evaluation of the microbial barrier performance of Caresite® valve against sporesog Bacillus subtilis signed by Prof. Dr. med. M.Exner and Dr. rer. nat. J. Gebel, Report DMT 2013-412, 11.12.2013
3. Test report - Evaluation of the microbial barrier performance of the female valve Caresite® by touch contamination with Staphylococcus aureus signed by Prof. Dr. med. M.Exner and Dr. rer. nat. J. Gebel, Report DMT 2014-194, 09.12.2014
4. Test Report - Closed system test by means of Sodium Fluorescein signed by Dr. rer. nat. J. Brünke Quality Labs BT GmbH Nuremberg, Report 1678.2-1, 28.05.2013
5. Choosing the Best Design for Intravenous Needleless Connectors to Prevent Bloodstream Infections written by William R. Jarvis, 28.07.2010
6. American Nurses Association - Independent Study Module: Needlestick Safety and Prevention written by Mary Foley, MS, RN and Annemarie T. Leyden, EdD, RN
7. Review Article - Review on Needle Free Drug Delivery Systems, International Journal of Pharma Research & Review, written by Bhagyashri Chavan, Abha Doshi, Yashwant Malode, Balu Misal, Sept 2013; 2(9):30-36
8. Engineering data on file: Caresite - 7 Day Stress Cracking Lipids with Isopropanol
9. White Paper: CARESITE™ Luer Access Device: Blood Clearance Test of the Needleless Connector, B. Braun Medical Inc., Bethlehem, PA., CS05_07/10_EB, 2010
10. White Paper: CARESITE™ Luer Access Device: Mechanical Hemolysis Test of the Needleless Connector, B. Braun Medical Inc., Bethlehem, PA., CS06_07/10_EB, 2010
11. White Paper: CARESITE™ Luer Access Device (LAD): 7- Day Microbial Barrier Performance, B. Braun Medical Inc., Bethlehem, PA., 15-5669 SW, 2017
12. Guidelines: Infusion Therapy Standards of Practice, page 152 published in Journal of Infusion Nursing (January/February 2016, Volume 39, Number 1S)
13. Study: Efficacy of a "saline only" flush protocol utilizing the Ultrasite® positive displacement device. Susan Silverstein, RN, CRNI, Nurse Consultant, Omnicare Infusion Services of Northern Illinois, January 2003
14. Study: Journal of Vascular Access Devices, Volume 5, Issue 4, 2000, Page 31-33, The effects of positive pressure devices on catheter occlusions, Loretta Berger RN, CRNI
15. Study: Leone M, Dillon R. Catheter outcomes in home infusion. JIN March/April 2008 Vol 31, No2

Dispozitive medicale clasa II-a. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale produselor. Acest material este dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: +4 0722 591 065 / +4 0723 550 017 sau E-mail: pharmacovigilance.ro@bbraun.com