

Introcan Safety® 3

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Primul cateter venos periferic cu dublă protecție automată:
împotriva înțepăturilor de ac și expunerii la sânge.

Pentru un acces venos...

...delicat pentru pacienți



Bizou universal

- Facilitează un număr crescut de unghiuri de inserție
- Proiectat pentru a minimiza traumele de puncție³
- Inserție cu rupere minimă a țesutului (tăietură V)³




Platformă pentru stabilizare

- Îmbunătățește stabilitatea cateterului și îi reduce mobilitatea în interiorul vasului de sânge
- Capăt Luer ridicat pentru a facilita conectarea departe de pielea pacientului

...sigur pentru personalul medical

Sept blocare reflux cu acces multiplu

- Ajută la prevenirea expunerii la sânge¹
- Poate fi utilizat de mai multe ori
- Reduce necesitatea compresiei venoase¹
- Îmbunătățește eficiența procesului^{1,2}

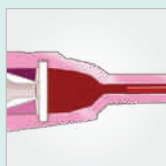

Scut de protecție pasivă

- Se activează automat
- Nu poate fi ocolit
- Nu necesită activare manuală



...confortabil pentru pacienți

Cateter din PUR

Se înmoaie la temperatura corpului și este dovedit că are un impact pozitiv asupra duratei de utilizare și scade riscul de flebită⁴



Linii radio-opace

Vizibilitate bună sub raze X în caz de fragmentare



...ușor de utilizat și fiabil

Perfuzie automată


Potrivit pentru utilizare cu pompe automate de perfuzie, setate la o presiune maximă de 325 psi (G14 - G24)



...reușit din prima încercare

Tehnologie Dublu Flashback

- Favorizează abordul venos reușit din prima încercare¹
- Primul reflux în camera de reflux și al doilea reflux în cateter confirmă că acul și cateterul sunt în vas.

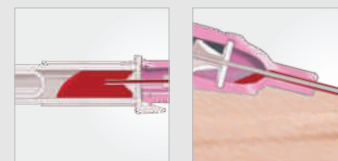

1. Haeseler G, Hildebrand M, Fritscher J. Efficacy and base of use of an intravenous catheter designed to prevent blood leakage: a prospective observational trial. 2015. J Vasc Access: 1-4.

2. Cooper D, Whitfield M.D, Newton D, Chiarella J, Machaczek KK. Introduction of a non-ported peripheral intravenous catheter with multiuse blood control septum offers improvements in the overall efficiency of the procedure and is clinically well accepted. Int. J of Healthcare Techn and Mgmt. January 2016; 1-20.


3. Suzuki T, Fukuyama H, Nishiyama J, Oda M, Takahashi M. Differences in Penetration Force of Intravenous Catheters: Effect of Grinding Methods on Inner Needles of Intravenous Catheters. Tokai J Exp Clin Med. 2004; 29(4): 175-181.

4. Maki D.G, Ringer M. Risk Factors for infusion-related Phlebitis with Small Peripheral Venous Catheters: A randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. 1991 May 15; 114(10):845-54.

Introcan Safety® 3


Fără expunere la sânge, fără stres

INCIDENȚA SCURGERILOR DE SÂNGE
în timpul abordului venos (în %)

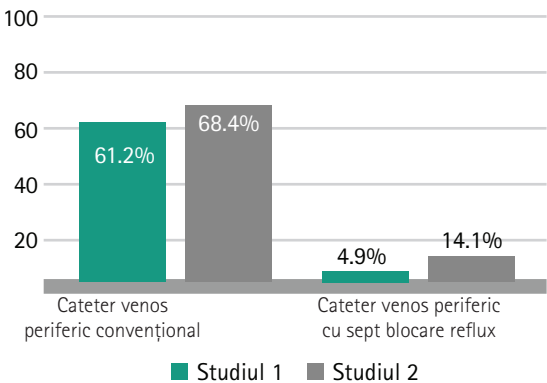


Studiul 1: Haeseler G, Hildebrand M, Fritscher J. Efficacy and base of use of an intravenous catheter designed to prevent blood leakage: a prospective observational trial. 2015. J Vasc Access: 1-4.

NECESITATEA COMPRESIEI VENEI
în timpul abordului venos (în %)

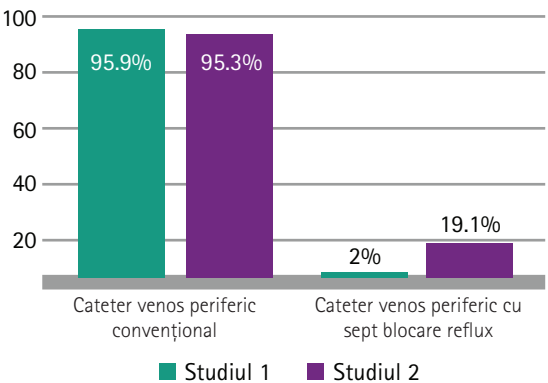


Studiul 2: Seiberlich LE, Keay V, Kallos S, Junghans T, Lang E, McRae AD. Clinical performance of a new blood control peripheral intravenous catheter: A prospective, randomized controlled study. Int. Emerg. Nurs. 2016 Mar

Septul cu acces multiplu blochează refluxul sangvin în timpul retragerii acului și în timp ce se efectuează conexiuni Luer. Astfel se reduc riscurile asociate expunerii la sânge, precum și timpul și materialele necesare pentru curățenie.

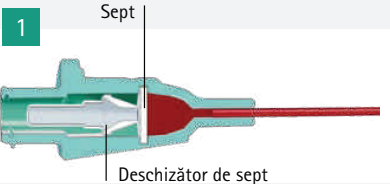


Sept închis

- Septul se închide când acul este scos din conectorul cateterului.
- Deschizătorul de sept se retrage în spatele septului, controlând astfel fluxul de sânge.

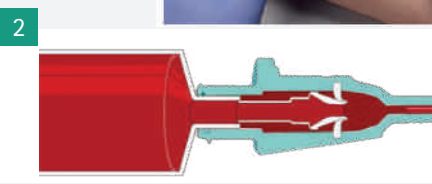

Sept deschis

- Septul se deschide atunci când se atașează o conexiune Luer (seringă, linie IV, extensie, dispozitiv de colectare a sângelui, etc.) la spatele conectorului cateterului.
- Conexiunea Luer împinge deschizătorul de sept, deschizând septul complet. Fluxul nu este afectat.

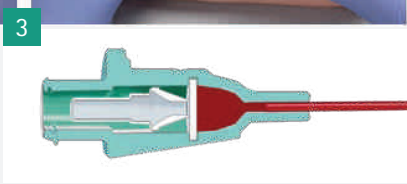

Sept închis

- Septul se închide când dispozitivul de conectare este scos din conectorul cateterului.
- Deschizătorul de sept se retrage în spatele septului, controlând din nou fluxul de sânge.

Portofoliul Introcan Safety® 3 disponibil în România

Introcan Safety® 3	Calibru	Lungime cateter (inch)	(mm)	Diametru cateter (mm)	Debit (ml/min)	Debit (ml/oră)	Cod (REF)
	24	3/4	19	0.7	22	1320	4251127-01
	22	1	25	0.9	35	2100	4251128-01
	20	1	25	1.1	65	3900	4251129-01
	20	1 1/4	32	1.1	60	3600	4251130-01
	18	1 1/4	32	1.3	105	6300	4251131-01
	18	1 3/4	45	1.3	100	6000	4251132-01
	14	2	50	2.2	310	18600	4251134-01

Materialul cateterului: PUR Produsele nu conțin Latex, PVC sau DEHP.

Dispozitive medicale clasa II-a. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale produselor. Acest material este dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: +4 0722 591 065 / +4 0723 550 017 sau E-mail: pharmacovigilance.ro@bbraun.com

B. Braun România
București
S-Park, clădirea B3, etaj 2,
Str. Tipografilor 11-15, Sect. 1, București, 013714
Tel.: +40 21 231 15 37 | Fax: +40 21 231 15 36

Sănandrei
Str. Bernd Braun, nr. 1,
Jud. Timiș, 307375
Tel.: +40 256 284 905 | Fax: +40 256 284 907

www.magazin-bbraun.ro
www.bbraun.ro
www.facebook.com/bbraunRO
contact.ro@bbraun.com

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE