


SwabCap®

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Capac dezinfectant cu IPA 70%
pentru conectorii fără ac

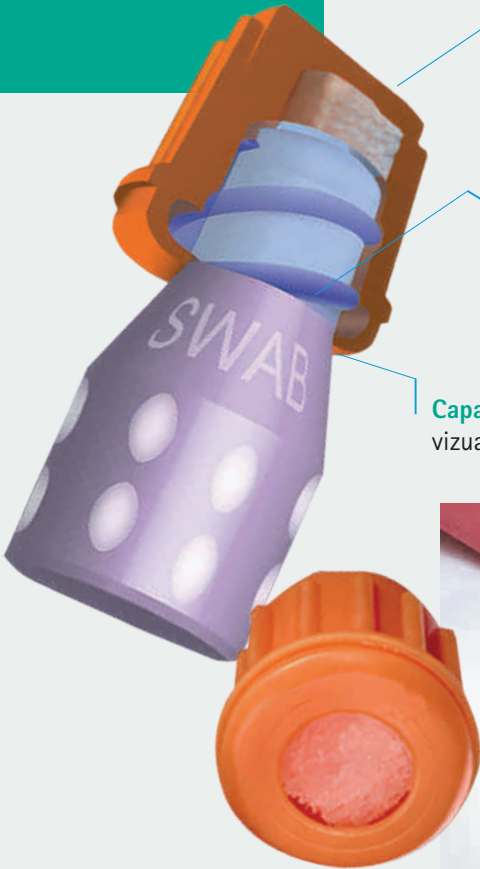

Burete îmbibat cu alcool izopropilic 70%, care acoperă atât partea superioară a conectorului, cât și filetul

Sigiliu pentru capacul filetului, care menține alcoolul în interior și împiedică pătrunderea contaminanților, asigurând protecție maximă

Capac colorat pentru confirmarea vizuala a dezinfectării



- Decontaminare microbiană în 30 de secunde dovedită împotriva a patru tulpini
- Dezinfectare continuă a suprafeței conectorului, FDA 510(k), până la 7 zile pentru siguranța pacientului



- Ambalaj individual steril, pentru reducerea riscului de contaminare încrucișată



- Pachet cu 10 capace pentru păstrarea lor aproape de punctul de utilizare, pe stativul IV



Dezinfectare în 30 de secunde

Report of a study commissioned by ICU Medical, Inc. and conducted by Toxikon

Eficacitatea antimicrobiană a capăcelului SwabCap® a fost testată împotriva *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterobacter cloacae* și *Candida albicans*.

După 30 de secunde de contact, SwabCap® a demonstrat o reducere medie de peste 4 log a microorganismelor pe conectorii utilizați, depășind standardele de eficacitate și oferind protecție rapidă împotriva infecțiilor.

Tulpina testată	Reducerea Log ₁₀ fata de concentratia initiala a tulpinii de testare	
	Criterii de acceptare	Rezultat observat
P. aeruginosa	≥4.0	5.2
S. aureus	≥4.0	5.3
E. cloacae	≥4.0	4.9
C. albicans	≥4.0	4.3

Valoarea rezultatului observat este reducerea medie Log₁₀ față de valoarea inițială.

Sigilează conectorul: Protejează pacientul


Scheers, G. Presented at AVA, October 2011

Studiu retrospectiv, multicentric, desfășurat în 12 spitale, incluzând toate secțiile de internare și ATI - cel mai amplu studiu efectuat până în prezent cu privire la utilizarea capacelor de dezinfectare.

Rata infecțiilor de flux sangvin asociate cateterelor centrale (CLABSI): 1,682 înainte de utilizarea capacelor și 0,6461 după, la 1000 de zile de menținere a cateterelor.

Reducere de 61,6% a CLABSI ($p < 0,0020$).

Impactul utilizării capacului dezinfectant

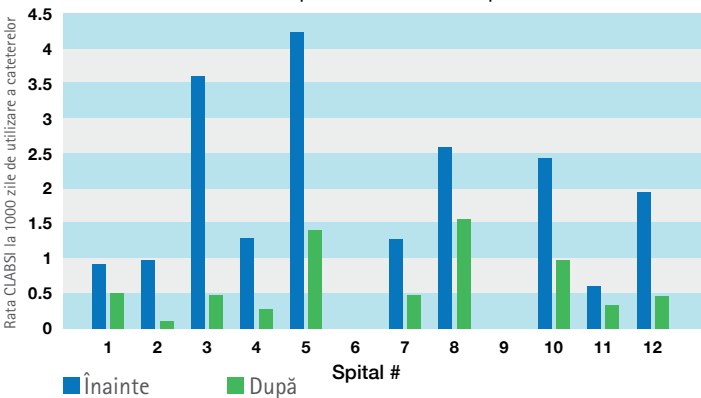


Denumire articol	Cod articol	Unitate de vânzare
SWABCAP VALVE CAP WITH 70% IPA	EM-SCXT3	Cutie x 200 buc


Omniflush® cu SwabCap®

Seringa preumplută cu NaCl 0.9%, cu capac dezinfectant IPA 70% integrat în piston

Atunci când este utilizat între administrările de medicamente, SwabCap® poate fi îndepărtat și păstrat pentru utilizare ulterioară.

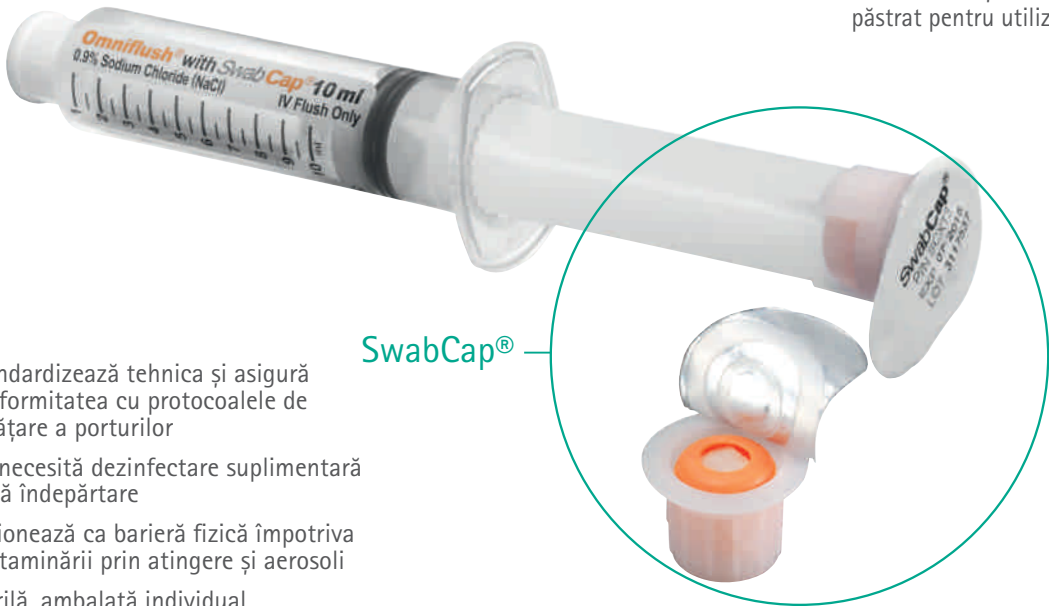

- Standardizează tehnica și asigură conformitatea cu protocoalele de curățare a porturilor
- Nu necesită dezinfectare suplimentară după îndepărtare
- Acționează ca barieră fizică împotriva contaminării prin atingere și aerosoli
- Sterilă, ambalată individual
- Volume disponibile: 3 ml, 5 ml, 10 ml

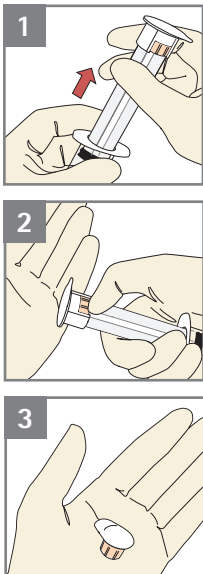


Beneficii pentru dvs.

- Tehnică de dezinfectare simplificată și standardizată, care economisește timp personalului medical.
- Combinarea seringii de clătire cu SwabCap® plasează produsul la punctul de îngrijire.
- Conformitate mai ușoară cu ghidurile de dezinfectare.



Beneficii pentru pacientul dvs.

- Dezinfectare pasivă și continuă a suprafeței și filetelor conectorului.
- Protecție împotriva contaminării prin atingere și aerosoli.
- Conformitatea dezinfectării este vizibilă și măsurabilă.

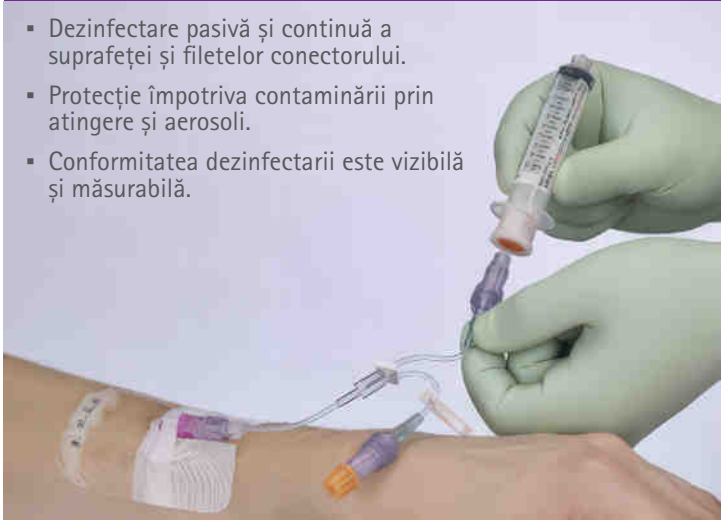

Produs	Unitate de Vânzare	Volum	Cod Produs
 OMNIFLUSH WITH SWABCAP 10 ML IN 10 ML	Cutie x 100 bucăți	10 ml clorură de sodiu 0.9% (NaCl)	EM-3513576SC
 OMNIFLUSH WITH SWABCAP 5 ML IN 10 ML	Cutie x 100 bucăți	5 ml clorură de sodiu 0.9% (NaCl)	EM-3513575SC
 OMNIFLUSH WITH SWABCAP 3 ML IN 10 ML	Cutie x 100 bucăți	3 ml clorură de sodiu 0.9% (NaCl)	EM-3513572SC

Dispozitive medicale clasa II-a. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale produselor. Acest material este dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: +4 0722 591 065 / +4 0723 550 017 sau E-mail: pharmacovigilance.ro@bbraun.com

B. Braun România
București
S-Park, clădirea B3, etaj 2,
Str. Tipografilor 11-15, Sect. 1, București, 013714
Tel.: +40 21 231 15 37 | Fax: +40 21 231 15 36

Sănandrei
Str. Bernd Braun, nr. 1,
Jud. Timiș, 307375
Tel.: +40 256 284 905 | Fax: +40 256 284 907

www.magazin-bbraun.ro
www.bbraun.ro
www.facebook.com/bbraunRO
contact.ro@bbraun.com

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE