


Vasofix Safety®

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE

Cateterul venos periferic închis, cu port de injectare și protecție automată împotriva înțepăturilor de ac.

Pentru un acces venos...

...confortabil pentru pacienți

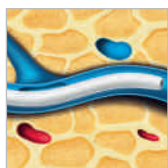

Cateter din PUR

Se înmoaie la temperatura corpului și este dovedit că are un impact pozitiv asupra duratei de utilizare și scade riscul de flebită¹.



Linii radio-opace

Vizibilitate bună sub raze X în caz de fragmentare



Aripi de fixare

- Proiectate pentru a îmbunătăți stabilitatea cateterului
- Se adaptează la suprafața pielii pentru un confort maxim al pacientului

...sigur pentru pacienți



Filtru hidrofob și capac de închidere detașabil

- Capac cu filtru hidrofob care previne revărsarea sângelui din canulă/ camera de reflux și riscul contaminării
- Conul de închidere detașabil permite închiderea directă a cateterului cu o singură mână

...delicat pentru pacienți



Bizou universal

- Facilitează un număr crescut de unghiuri de inserție
- Proiectat pentru a minimiza traumele de puncție²
- Inserție cu rupere minimă a țesutului (tăietură V)²

...sigur pentru personalul medical



Scut de protecție pasivă

- Se activează automat
- Nu poate fi ocolit
- Nu necesită activare manuală

...ușor și versatil



Port de injectare

- Pentru o injecție rapidă și ușoară fără întreruperea infuziei³
- Permite injectarea fără ac
- Margini de prindere pentru o deschidere ușoară
- Închiderea portului de injectare prin rotirea capacului de protecție cu 180°

...reușit din prima încercare

Tehnologie Dublu Flashback

- Favorizează abordul venos reușit din prima încercare³
- Primul reflux în camera de reflux și al doilea reflux în cateter confirmă că acul și cateterul sunt în vas⁴.



1. Maki D.G. Ringer M. Risk Factors for infusion-related Phlebitis with Small Peripheral Venous Catheters: A randomized Controlled Trial. Ann Intern Med. 1991 May 15; 114(10):845-54.
2. Suzuki T., Fukuyama H., Nishiyama J., Oda M., Takahashi M. Differences in Penetration Force of Intravenous Catheters: Effect of Grinding Methods on Inner Needles of Intravenous Catheters. Tokai J Exp Clin Med. 2004; 29(4): 175-181.
3. Moergeli et al. A comparison of first attempt cannulation success of periph-eral venous catheter systems with and without wings and injection ports in surgical patients—a randomized trial. BMC Anesthesiology. 2022 (88): 1-11.
4. Cooper D. Whitfield M.D. Newton D. Chiarella J. Machaczek KK. Introduction of a non-port peripheral intravenous catheter with multi-use blood control septum offers improvements in the overall efficiency of the procedure and is clinically well accepted. Int. J of Healthcare Techn and Mgmt. January 2016; 1-20.

Vasofix Safety®

Acces venos optimizat pentru siguranță și versatilitate în utilizare

Oferă flexibilitate superioară, cu multiple opțiuni de manipulare și inserție, adaptate cerințelor clinice variate, asigurând o fixare sigură și un control precis în utilizare. Ușor de utilizat: Nu sunt necesari pași suplimentari pentru a pregăti cateterul pentru inserție.




Port de injectare și grip de fixare



Aripi și con de închidere



Port de injectare și con de închidere

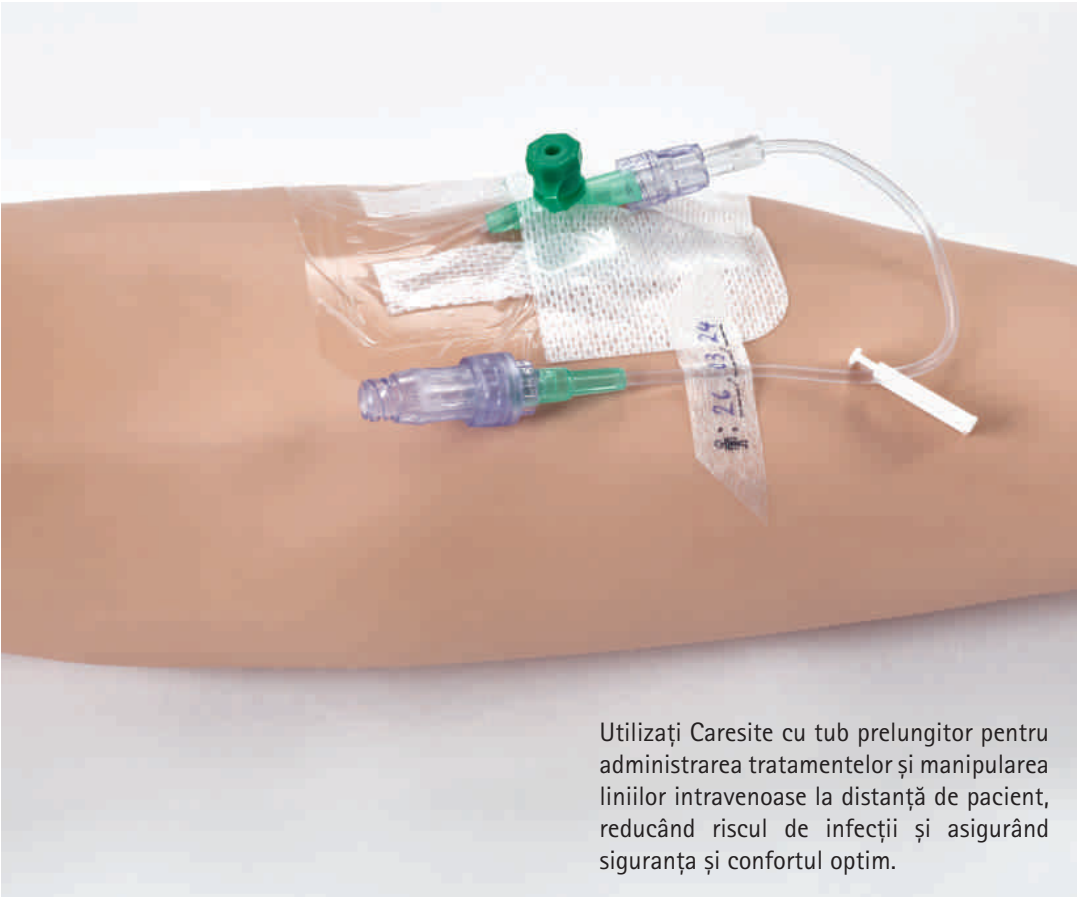

Utilizați Caresite cu tub prelungitor pentru administrarea tratamentelor și manipularea liniilor intravenoase la distanță de pacient, reducând riscul de infecții și asigurând siguranța și confortul optim.

Portofoliul Vasofix Safety® disponibil în România

Vasofix® Safety	Calibru	Lungime cateter		Diametru cateter ø (mm)	Debit (ml / min)	Debit (ml / oră)	Material cateter	
		(inch)	(mm)				FEP*	PUR*
	24	3/4	19	0.70	22	1320	-	4269071S-01
	22	1	25	0.90	36	2160	4268091S-01	4269098S-01
	20	1	25	1.10	65	3900	-	4269217S-01
	20	1 1/4	33	1.10	61	3660		4269110S-01
	18	1 1/4	33	1.30	103	6180		4269330S-01
	18	1 3/4	45	1.30	96	5760	4268130S-01	4269136S-01
	17	1 3/4	45	1.50	128	7680		4269152S-01
	16	2	50	1.70	196	11760		4269179S-01
	14	2	50	2.20	343	20580	4268210S-01	4269225S-01

Produsele nu conțin Latex, PVC sau DEHP.

Dispozitive medicale clasa II-a. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare ale produselor. Acest material este dedicat exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății. Pentru raportarea evenimentelor adverse vă rugăm să utilizați următoarele date de contact: +4 0722 591 065 / +4 0723 550 017 sau E-mail: pharmacovigilance.ro@bbraun.com

B. Braun România
București
S-Park, clădirea B3, etaj 2,
Str. Tipografilor 11-15, Sect. 1, București, 013714
Tel.: +40 21 231 15 37 | Fax: +40 21 231 15 36

Sănandrei
Str. Bernd Braun, nr. 1,
Jud. Timiș, 307375
Tel.: +40 256 284 905 | Fax: +40 256 284 907

www.magazin-bbraun.ro
www.bbraun.ro
www.facebook.com/bbraunRO
contact.ro@bbraun.com

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE